

Sicher. Schonend. Präzise.

Die neue Safety-Multifly® PRO: Schützt den Anwender, schont den Patienten.

Die neue Safety-Multifly® PRO baut auf der bewährten Safety-Multifly® Kanüle von SARSTEDT auf und hebt sie durch gezielte Verbesserungen auf ein neues Niveau – für höchste Ansprüche, sensible Patientengruppen und ein neues Maß an Sicherheit in gewohnter SARSTEDT-Qualität.

Maximale Sicherheit

Die integrierten Auslöseknöpfe aktivieren die Kanüle direkt nach der Blutentnahme in der Vene. Nadelstichverletzungen können somit effektiv vermieden werden.

Sicheres Punktieren

Der reduzierte Außendurchmesser der ultradünnwandigen 23 G Kanüle im Vergleich zur dünnwandigen 21 G Kanüle erleichtert die Punktion kleiner oder schwer zugänglicher Venen – bei vergleichbarem Blutfluss.

Höherer Blutfluss

Der vergrößerte Innendurchmesser ermöglicht einen bis zu 50 % höheren Blutfluss¹ gegenüber einer dünnwandigen Kanüle und unterstützt damit ein schnelleres Befüllen der Blutentnahmeröhrchen für effizientere Abläufe im klinischen Alltag.

Hoher Patientenkomfort

Bis zu 33 % geringere Einstichkräfte und bis zu 28 % geringere Gleitkräfte² gegenüber einer dünnwandigen 21 G Kanüle können den Patientenkomfort erhöhen.

Komfortable Handhabung


Neben den vergrößerten Flügeln bietet das Griffstück eine zusätzliche Unterstützung für eine kontrollierte und stabile Kanülenführung.



Ultradünnwandige Kanülen. Spürbare Vorteile im medizinischen Alltag.

Weniger Kraft. Mehr Komfort.


Die ultradünnwandige 23 G Kanüle reduziert im Vergleich zur dünnwandigen 21 G Kanüle Einstichkräfte um bis zu 33 % und Gleitkräfte um bis zu 28 %. Das unterstützt eine schonendere Blutentnahme und erhöht den Patientenkomfort.

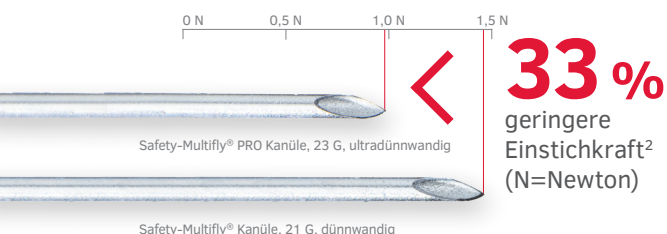

Schnellerer Blutfluss. Effizientere Abläufe.

Der größere Innendurchmesser der ultradünnwandigen Safety-Multifly® PRO Kanüle ermöglicht einen bis zu 50 % höheren Blutfluss als eine dünnwandige Kanüle.¹ So kann eine kleinere Kanülengröße verwendet werden, ohne auf einen vergleichbaren Blutfluss zu verzichten. Das kann die Punktion erleichtern und effiziente Abläufe im klinischen Alltag unterstützen.


- Safety-Multifly® PRO Kanüle, ultradünnwandig
- Safety-Multifly® Kanüle, dünnwandig

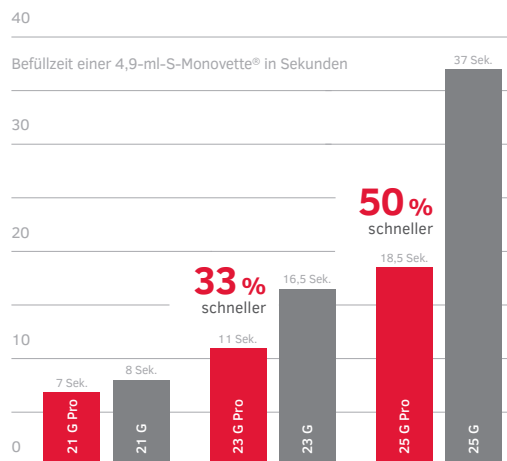

¹ Basierend auf Whitepaper "Comparison of tube filling of the new SARSTEDT Safety-Multifly® PRO Needle to the current Safety-Multifly® Needle", SARSTEDT 2026

Kleiner außen. Größer innen.

Im Vergleich zu dünnwandigen Kanülen besitzt die ultradünnwandige Kanüle bei gleichem Außendurchmesser einen größeren Innendurchmesser. Dadurch bleibt selbst bei kleineren Kanülengrößen ein effizienter Blutfluss erhalten und die reduzierten Scherkräfte tragen zu einer Verringerung der Hämolyse bei.

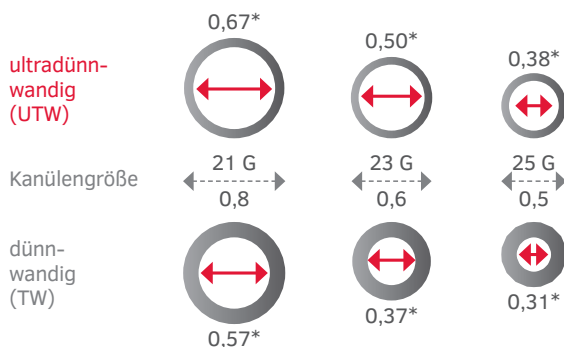

* Die angegebenen Werte entsprechen den Innendurchmessern. Alle Maße sind in mm angegeben.

Sicher punktieren. Auch bei schwierigen Venen.

Durch den reduzierten Außendurchmesser erleichtert die ultradünnwandige 23 G Kanüle im Vergleich zur dünnwandigen 21 G Kanüle die Punktion kleiner oder schwer zugänglicher Venen und unterstützt eine kontrollierte Blutentnahme – bei vergleichbarem Blutfluss.



² Basierend auf Whitepaper "Comparison of Penetration and Sliding Force of the new SARSTEDT Safety-Multifly® PRO Needle to the current Safety-Multifly® Needle", SARSTEDT 2026